


ТРАНСГИНГИВАЛЬНЫЙ АБАТМЕНТ RENOVA® R-1



НОВЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ,
КОТОРЫЙ СПОСОБСТВУЕТ СОХРАНЕНИЮ ТКАНЕЙ
ВОКРУГ ИМПЛАНТАТА И ГАРАНТИРУЕТ ОБШИРНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ НА ЭТАПЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Возможность работать в полном цифровом протоколе.
- Упрощает этап протезирования и способствует сохранению тканей вокруг имплантата, благодаря конвертированию ортопедического соединения из внутреннего шестигранника во внешний, **с уровня костной ткани на уровень мягких тканей.**
- Зафиксировав абатмент однажды, в соответствии с профилем прорезывания, он больше не выкручивается, что гарантирует стабильность окружающих имплантат тканей.
- Фиксация трансгингивального абатмента с усилием 30 Нсм гарантирует его идеальное позиционирование на имплантате. Это предотвращает миграцию и колонизацию бактерий на поверхности.
- Абатмент может использоваться при немедленной нагрузке с нужными дополнительными компонентами в зависимости от типа ортопедической конструкции. Также его можно использовать при отсроченной нагрузке, зафиксировав на него формирователь десны, что позволяет сохранить мягкие ткани для их лучшей адаптации и полной интеграции имплантата. Платформа с внешним соединением позволяет применять широкий спектр ортопедических решений в любой клинической ситуации.
- Абатмент доступен с различной высотой чрезслизистой части.

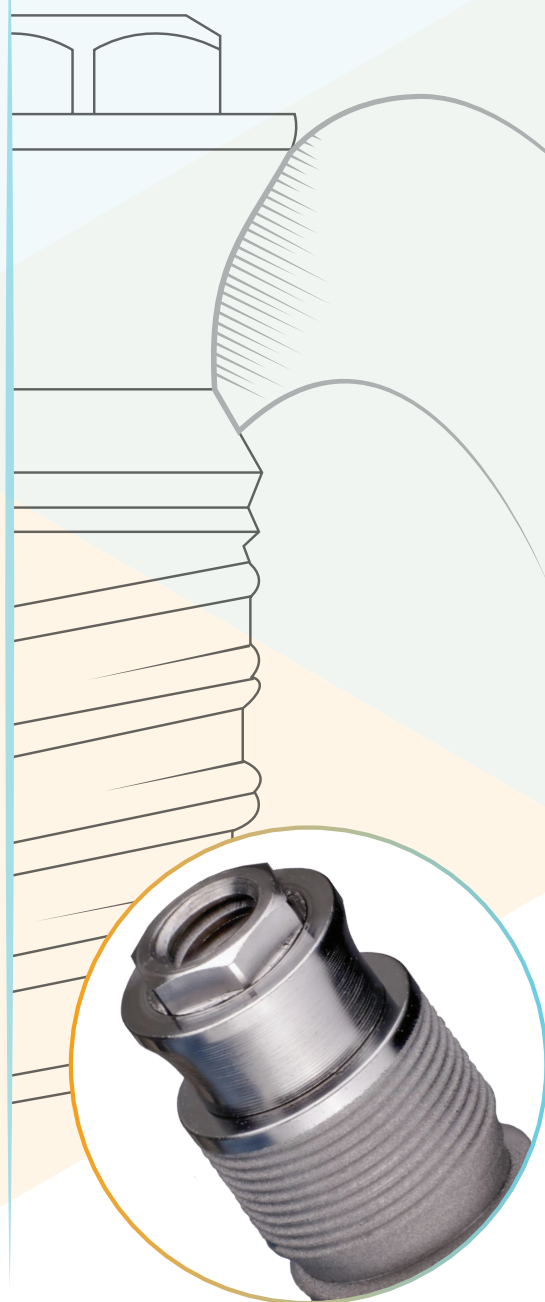

СОХРАНЕНИЕ ТКАНЕЙ ВОКРУГ ИМПЛАНТАТА

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОТСУТСТВИЕ РЕЗОРБЦИИ

ИДЕАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

Вертикальный и горизонтальный зазор сокращается до минимума, таким образом, **минимизируя ротацию между компонентами и область воспалительного инфильтрата**, одну из основных причин резорбции костной ткани вокруг имплантата.


Множество научных исследований, сделанных в 1990-е годы Полом Биноном (Paul Bunon) в США подтверждают значимость сопоставления имплантата и абатмента, которое не превышает ротацию на 4 градуса. Нам удалось достичь **ротации между компонентами в диапазоне 0.18-0.93 градуса**, гарантируя их **идеальную стабильность и идеальную механическую фиксацию ортопедического винта**.



ТРАНСГИНГИВАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ


ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 3.25

Высота шейки	Арт.
2 мм	43121A
3.5 мм	43121N

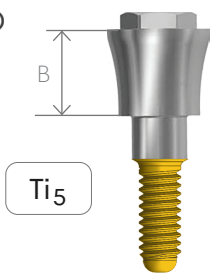

ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 3.75

Высота шейки	Арт.
2 мм	43121D
3.5 мм	43121E

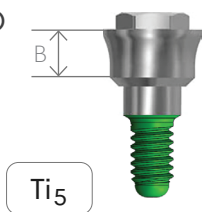


ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ

Высота	Арт.
4 мм	10035B



ВАЖНО! Трансгингивальный абатмент и его компоненты используются только с ортопедическим (клиническим) винтом 43116D.

ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

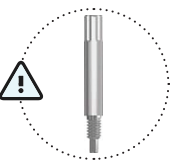


ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ Трансфер-аналог (лабораторный).

Включен в комплект с трансфером. Используется в качестве лабораторного винта с аналогом 43116C. Также продается отдельно.

Арт.
43100L

Ti5

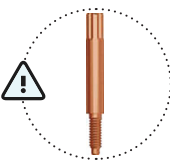

ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ Трансфер-абатмент (клинический).

Включен в комплект с трансфером. Использовать в качестве клинического винта для трансфера трансгингивального абатмента с более короткой резьбой. Также продается отдельно.

Арт.
43100M

Ti5



ТРАНСФЕР ДЛЯ СНЯТИЯ СЛЕПКОВ

Арт.
43121F

Ti5



АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА

Арт.
43116C

Ti5

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ




ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ

Можно использовать лабораторный винт с аналогом 43116С. Включен, но также продается отдельно.

Арт.
43100А

Ti5

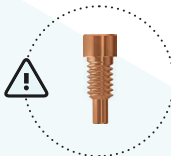

КЛИНИЧЕСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ

Использовать в качестве окончательного ортопедического винта трансгингивального абатмента с более короткой резьбой. Также продается отдельно.

Арт.
43116D

Ti5



ПРЯМОЙ ВРЕМЕННЫЙ АБАТМЕНТ

В	Д	Арт.
3 мм	5 мм	10039L

PEEK




ПРЯМОЙ АБАТМЕНТ

Ti5

В	Д	Арт.
	4.1 мм	43090W
1.5 мм	5 мм	43089W
3 мм	5 мм	43089Z

УГЛОВОЙ АБАТМЕНТ

Ti5

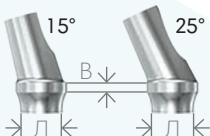

В	Д	Градус	Арт.
1,5 мм	5 мм	15	10038A
1,5 мм	5 мм	25	10038D
3 мм	5 мм	15	10038H
3 мм	5 мм	25	10038K

ВРЕМЕННЫЙ АБАТМЕНТ

PEEK

	Арт.
с захватом	10039H
без захвата	10039K



ВРЕМЕННЫЙ АБАТМЕНТ

Ti5


	Арт.
с захватом	43120D
без захвата	43120E



Фиксировать с динамометрическим усилием 20 Нсм переходник W001L/W001C

ИНСТРУМЕНТЫ

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

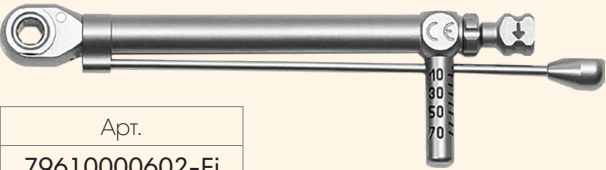

Арт.
79610000602-Fi

АДАПТЕР ДЛЯ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА

	Арт.
короткий	W0001C
длинный	W0001L


INOX



МАШИННАЯ ОТВЕРТКА

INOX


	Длина	Арт.
короткая	8.8 мм	CG0024
длинная	14.8 мм	CG0030

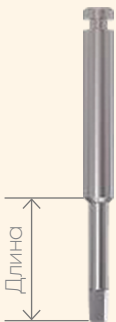


РУЧНАЯ ОТВЕРТКА

INOX

	Длина	Арт.
микро	4.5 мм	GMX100i
короткая	11.5 мм	GM250
длинная	18 мм	001152i

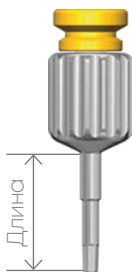

КОМПОНЕНТЫ CAD/CAM

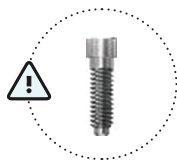


ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ

Можно использовать лабораторный винт с аналогом 43116С. Включен, но также продается отдельно.

Арт.
43100А

Ti₅

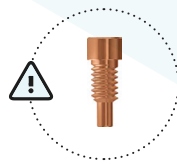

КЛИНИЧЕСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ

Использовать в качестве окончательного ортопедического винта трансгингивального абатмента с более короткой резьбой. Также продается отдельно.

Арт.
43116D

Ti₅

ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ С ЗАХВАТОМ



Арт.
43120N

Ti₅

Для работы в цифровом CAD-CAM протоколе и традиционным методом.

Для одиночных коронок с цементной и винтовой фиксации

Для множественных реставраций с цементной фиксацией

ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ БЕЗ ЗАХВАТА



Арт.
43120P

Ti₅

Для работы в цифровом CAD-CAM протоколе и традиционным методом.

Для множественных реставраций с цементной и винтовой фиксации.

ЦИФРОВОЙ АНАЛОГ



Арт.
43116B

Ti₅

Аналог для цифровых моделей методом 3D печати. Характерная форма со скруглёнными краями позволяет легко позиционировать его в модель.

Апикальный винт даёт возможность всегда иметь хорошую рабочую стабильность.

Этот ортопедический компонент следует использовать с цифровыми библиотеками Altracore.

СКАН АБАТМЕНТ



Арт.
43090C

Ti₅


Цифровой Внутри-ротовой CAD-CAM Скан абатмент и Лабораторный Скан абатмент.

Для одиночных коронок с цементной и винтовой фиксации

Для множественных реставраций с цементной фиксацией.

Фиксировать с динамометрическим усилием 20 Нсм переходник W001L/W001C

ЦИФРОВОЙ АНАЛОГ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

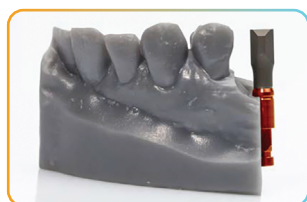

ПРАВИЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НЕ ОРИЕНТИРУЙТЕ
Скан Абатмента
в неподходящем
положении.

Важно совместить меньшую часть Скана Абатмента, которая всегда ориентирована по шестигранной стороне соединения, со стороной внешней квадратной формы цифрового тела аналога.

WWW

WWW.ALTRA-CORE.COM

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 540-67-35

E-MAIL

INFO.RUSSIA@ALTRA-CORE.COM